

Péče a ošetřování

stomatologických násadců
a instrumentária



HENRY SCHEIN®
DENTAL



Srovnání funkcí

Přístroj	čištění	lubrikace	dezinfekce	sušení/chlazení	tlakový vzduch	počet nástrojů
DAC Universal	✓	✓	✓	✓	✓	6
QUATTROcare Plus	✓	✓	✗	✗	✓	4
Ultimate CL Lubrication Unit	✓	✓	✗	✗	✓	3
Assistina 301 plus	✓	✓	✗	✗	✓	1
MELAtherm 10/ MELAtherm 10 EVO	✓	✗	✓	✓	✗	11

DAC Universal

Účel použití: plně automatický přístroj pro čištění, mazání a termickou dezinfekci kolének, turbínek a násadců. Další volitelné příslušenství (na objednání) umožňuje čištění ultrazvukových násadců, hrotů, trysek multifunkčních stříkaček, vzduchových scalerů a násadců ordinačních pískovaček.

Popis produktu: Stolní multifunkční přístroj s možností připojení stlačeného vzduchu. Doba trvání procesu 15 minut, příprava až 6 instrumentů v jedné vsázce. Adaptéry pro přímé a kolénkové násadce Sirona T1 Classic/TE, adaptér ISO/ INTRAmatic, adaptér kolénkového násadce KaVo a Bien-Air.

Kód zboží: SIR6727916

Specifikace: účinný proti virům, termo-dezinfekce je baktericidní, fungicidní a plně virucidní - TBC, S. aureus, C. albicans, HPV, HBV, HCV, HIV, COVID-19, chřipka, adenoviry, noroviry.



Cykly ošetření instrumentů



1. předběžné čištění, 2. test těsnosti, 3. vnitřní čištění, 4. promazání, 5. vnější čištění, 6. zahřátí až na 134°C,
7. back-flush= nasycená pára, 8. dezinfekce: 0,5 min. při 134°C, 9. chlazení - 10. Víko se pootevře.

Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo specialisty Henry Schein:

Michal Komora – 731 651 675, michal.komora@henryschein.cz, Richard Janů – 603 511 935, richard.janu@henryschein.cz

www.henryschein.cz

QUATTROcare Plus 2124A

Účel použití: plně automatický přístroj určený pro čištění a údržbu kolének, turbínek a nástrojů.

Popis produktu: stolní přístroj s možností připojení stlačeného vzduchu pro zvýšení účinnosti ošetření. Až 4 instrumenty během 1 minuty. Rychlé a jednoduché ošetření tímto přístrojem zaručí prodloužení životnosti vašich instrumentů.

Kód zboží: M094653

Specifikace: - 3 adaptéry pro kolénka a 1 adaptér pro turbínky typu MULTIflex, adaptér na čištění kleštin, přípravek pro čištění a lubrikaci QUATTROcare Plus sprej (500ml).



KAVO
Dental Excellence

Ultimate CL Lubrication Unit V3

Účel použití: plně automatický přístroj určený pro čištění a údržbu kolének, turbínek a nástrojů.

Popis produktu: stolní přístroj s možností připojení stlačeného vzduchu pro zvýšení účinnosti ošetření. Až 3 instrumenty během 1 minuty. Rychlé a jednoduché ošetření zaručí prodloužení životnosti vašich instrumentů.

Kód zboží: M097284

Specifikace: 2 adaptéry pro kolénka a 1 adaptér pro turbínky dle vašeho výběru (KAVO, SIRONA, NSK, Bien Air, W&H), adaptér pro údržbu kleštin. Systém umožňuje použití jakýchkoli běžných lubrikačních prostředků o objemu 500 ml.



B.A. INTERNATIONAL

W&H Assistina 301 plus

Účel použití: plně automatický přístroj určený pro čištění a údržbu kolének, turbínek a nástrojů.

Popis produktu: stolní přístroj připojený na tlakový vzduch. Ošetří 1 instrument během 35 sekund. Rychlé a jednoduché ošetření tímto přístrojem zaručí prodloužení životnosti vašich instrumentů.

Kód zboží: M43742

Specifikace: 1 adaptér pro kolénka a base adaptér MIDWEST pro turbínky + set náplní.



W&H

MELatherm 10 / MELatherm 10 EVO

Účel použití: Mycí a dezinfekční automat je určen k čištění, termické dezinfekci a sušení lékařského instrumentária a stomatologických nástrojů a dalších zdravotnických i nezdravotnických prostředků určených k dezinfekci a následně ke sterilizaci.

Popis produktu: Přístroj je dostupný ve 2 verzích: standardní nebo komfortní EVO s barevným LCD multifunkčním displejem, lze umístit samostatně – zabudovaný bez horní desky – samostatně stojící – samostatně stojící s podstavou. Objem mycí komory 84 litrů, připojení 230V/50 Hz nebo 3N AC 380V/50 Hz, voda a odpad.

Kód zboží: MEL10021/MEL20021

Specifikace: pro přípravu termostabilních lékařských a invazivních nástrojů určených pro strojové mytí a dezinfekci při 95°C. Aktivní proti vegetativním bakteriím, houbám, spórům hub, virům vč. HBV a HCV.

Doporučení: Přístroj je vhodný pro ordinace se 2 a více křesly, lék. kliniky a sterilizační centra. Univerzální přístroj pro mytí a dezinfekci stomatologických nástrojů a ostatního lékařského instrumentária.



MELAG

Manuální čištění, dezinfekce a lubrikace

WL-DRY Starter set

Set přípravků pro vnitřní čištění a dezinfekci stomatologických nástrojů (kolénka, turbínky).

Popis produktu:

WL-clean – roztok k čištění před dezinfekcí a sterilizací

WL-cid – roztok pro dezinfekci

WL-dry – sprej pro sušení po čištění a dezinfekci

Kód zboží: M109991

Specifikace: balení 2x WL-clean á 500ml, 2x WL-cid á 500ml, 2x WL-dry á 300ml

Doporučení: vhodné pro pravidelnou manuální údržbu v ordinaci stomatologie.



ALPRO®
ALPRO MEDICAL GMBH

MYKO-
BAKTERICIDNÍ
FUNGICIDNÍ
VIRUCIDNÍ

Čistící a lubrikační prostředky + příslušenství

QUATTROcare Plus Sprej

Sprej pro čištění a mazání stomatologických nástrojů v přístroji QUATTROcare PLUS 2124AA.

- 500 ml

KAV1.011.5720



KAVO
Dental Excellence

Maxima Oil sprej

Sprej pro čištění a mazání stomatologických nástrojů (bez adaptéru).

- 500 ml

9001570



Kavo spray

Sprej pro čištění a mazání stomatologických nástrojů (bez adaptéru).

- 500 ml

KAV0.411.9640



KAVO
Dental Excellence

MD-500

Servisní olej F1.

- 500 ml



0637520

MC-1000

Čistící roztok pro přístroj Assistina plus.

- 1 l



3392128



EuroSept Xtra Surface

Dezinfekční ubrousky s alkoholem
Vhodné pro vnější dezinfekci nástrojů.
Fungicidní, baktericidní, virucidní.

- doplňkové balení 120 ks

9884196



Adaptér na sprej pro kolénka

KAV0.411.9911



KAVO
Dental Excellence

Adaptér na sprej pro turbíny


Adaptér na sprej pro turbíny typ MULTiflex

KAV0.411.9921



KAVO
Dental Excellence

Adaptéry na spreje pro ruční mazání turbínek

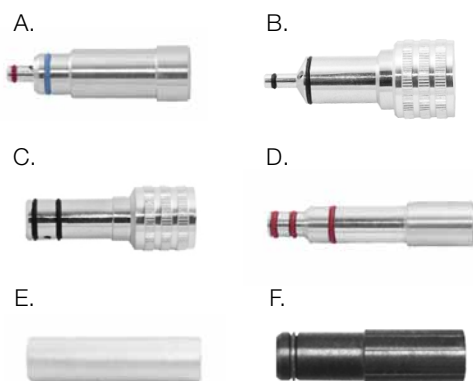

Pozice	Kód	Název
A	BAINOZW	Adaptér mazací pro turbíny W&H
B	BAINOZBAIR	Adaptér mazací pro turbíny typ BienAir
C	BAINOZS	Adaptér mazací pro turbíny typ Sirona
D	BAINOZK	Adaptér mazací pro turbíny typ KaVo
E	BAINOZN	Adaptér mazací pro turbíny NSK
F	BAINOZE	Adaptér mazací pro kolénka a nástroje E-Typ
G	BAINOFB	Adaptér mazací pro kleštiny stom. nástrojů

Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo specialisty Henry Schein:

Michal Komora – 731 651 675, michal.komora@henryschein.cz

Richard Janů – 603 511 935, richard.janu@henryschein.cz

✉ obchod@henryschein.cz ☎ 800 700 097

E-SHOP hsdental-shop.cz www.henryschein.cz